

2022年度版 Vol.2
web用価格改訂版

Quest for better hearing and communication of the hearing impaired



JiritsuCom!

より良い聞こえと
コミュニケーションのために

株式会社 自立コム

自立コムは「より良い聞こえとコミュニケーションのために」をモットーに聞こえに障害を感じる人々に役立つ商品の提供を通して社会に貢献します

日常生活用具給付制度で ご購入費用の90%が給付されます

日常生活用具給付制度について

日常生活用具給付制度とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を公費で助成する制度です。

個人の収入と公費負担額の関係はそれぞれの自治体で運用が異なりますが、一般的な基準として購入価格の9割が公費負担、1割が自己負担とされています。

※ 日常生活用具給付の基準、判断は、各市区町村で決定されます。

障害者手帳が必須

日常生活用具給付制度を受けるには、障害者手帳を取得して、障害者として認定される必要があります。障害があっても、障害者手帳を取得していない場合には、対象にはなりません。

※ 障害者手帳の取得に関しては、お住まいの地域の役所の障害福祉課にご相談ください。

主な障害種別と給付品目

給付される用具や機器は、障害別に品目が限定されています。

国の制度による種目	給付上限額	障害者手帳等級	耐用年数
屋内信号装置	87,400円 以上	2級以上	10年
火災警報器	15,500円 以上	2級以上	8年
携帯用信号装置	20,200円 以上	3級以上	6年
フラッシュベル	12,400円 以上	3級以上	10年
会議用拡聴器	38,200円 以上	4級以上	6年
補聴器対応電話機	25,000円 以上	4級以上	—
携帯用会話補助装置	98,800円 以上	4級以上	5年

※ 上記表の給付種目名は自治体により異なる場合がございます。

※ 給付の申請、種目、金額につきましては自治体の障害福祉課などにお問合せ下さい。

※ 給付及び給付対象の機種、内容、金額、耐用年数などは各自治体の判断となります。

本カタログの製品について

- 本カタログに掲載されている製品で、但し書きのないものは全て「1年保証」です。
- 電池が付属する商品の電池は、モニタ用電池のため早期に消耗する場合があります。

給付対象製品について

- 商品の組み合わせにより、複数の給付対象となる場合もございますので、お気軽にご相談下さい。

申請から製品が届くまでの流れ

各役所、販売店によって多少異なる場合があります。



1 製品を選んで見積書をもらう

必要な機器、用具が分からない場合、販売店にご相談下さい。
お客様の障害・症状、生活に合わせた製品のご提案と給付申請に必要な見積書を作成いたします。



2 障害福祉課で給付申請

お住まいの地域の役所の障害福祉課で日常生活用具給付申請を行います。給付申請書をもらい、お見積書と一緒に提出します。
※ カタログをお持ちの場合、一緒に持っていくと良いです。

- 審査を待つ

約1、2週間程度で役所の審査が終わります。



3 給付券を販売店へ送る

審査が通るとお客様へ「日常生活用具給付券」、販売店へ「給付決定通知書」が届きます。給付券に署名捺印を押して販売店へ送ります。 ※ 自治体により異なる場合がございます。

4 自己負担額のお支払い


販売店は給付券が届くと、お客様に自己負担額をご請求します。自己負担分のお支払いを確認後、お客様に商品が配送されます。
※ 販売店によっては、商品と一緒に自己負担額の請求書が同梱されています。



- 製品が届きます

屋内信号装置 ベルマンビジットシステム

日常生活に必要な情報を
光・振動・音でお知らせするシステムです

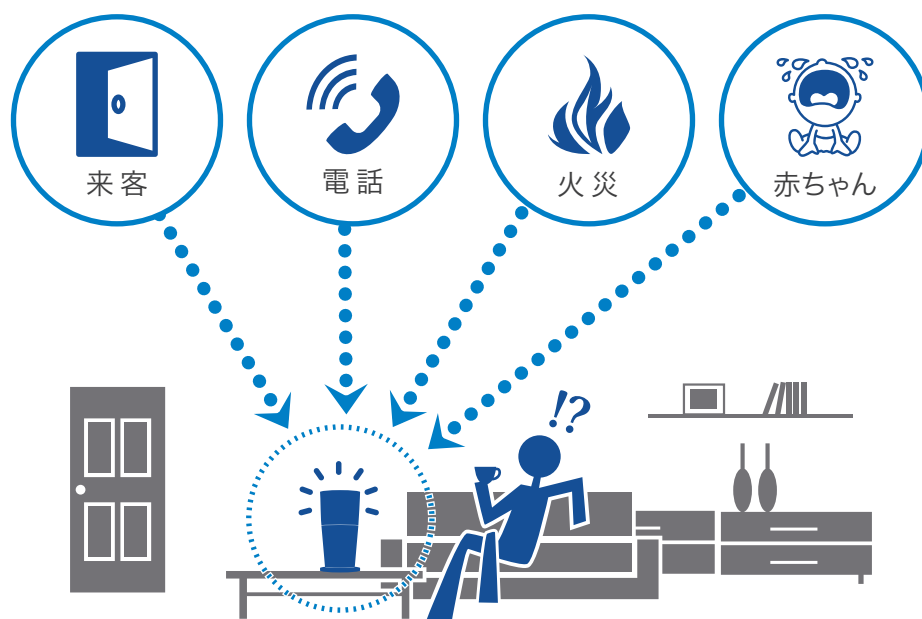

自立した生活を送るための福祉機器

屋内信号装置「ベルマンビジットシステム」は、耳の不自由な方が日常生活を送るために必要な情報をお知らせすることを目的として作られた福祉システムです。

屋内の各箇所に発信器（センサ）を設置して、ドアチャイムの音や、電話やFAXの着信などを感知して無線発信。受信器が光や振動または大きな音で通知します。来客、電話／FAXの着信、目覚まし、火災警報音、赤ちゃんの泣き声などを容易に知ることができます。

屋内信号装置は聴こえの不自由な方々が、誰かに頼ることなく、自立した生活を送るための必需品です。


日常生活用具の給付対象品

屋内信号装置は、厚生労働省の定める「聴覚障害者用日常生活用具」の給付対象品です。日常生活用具の給付とは、身体障害者手帳の2級以上を所持する方に対して、居住地の自治体が日常生活を送る上で必要と認めた場合に、87,400円を上限として支給される制度です。この給付制度を利用することで、屋内信号装置の購入の負担を軽減することができます。

屋内信号装置「ベルマンビジットシステム」は非課税認定商品です。
発信器と受信器を同時に購入する場合は非課税となります。
※ 個別にご購入する場合は、課税対象となります。

ベルマンビジットシステムの屋内信号装置は さまざまな組み合わせが可能です

屋内信号装置は発信器と受信器をペアで使用しますが、建物の形式や間取り
それぞれの生活習慣、家族構成などに合わせて、さまざまな組み合わせが可能です

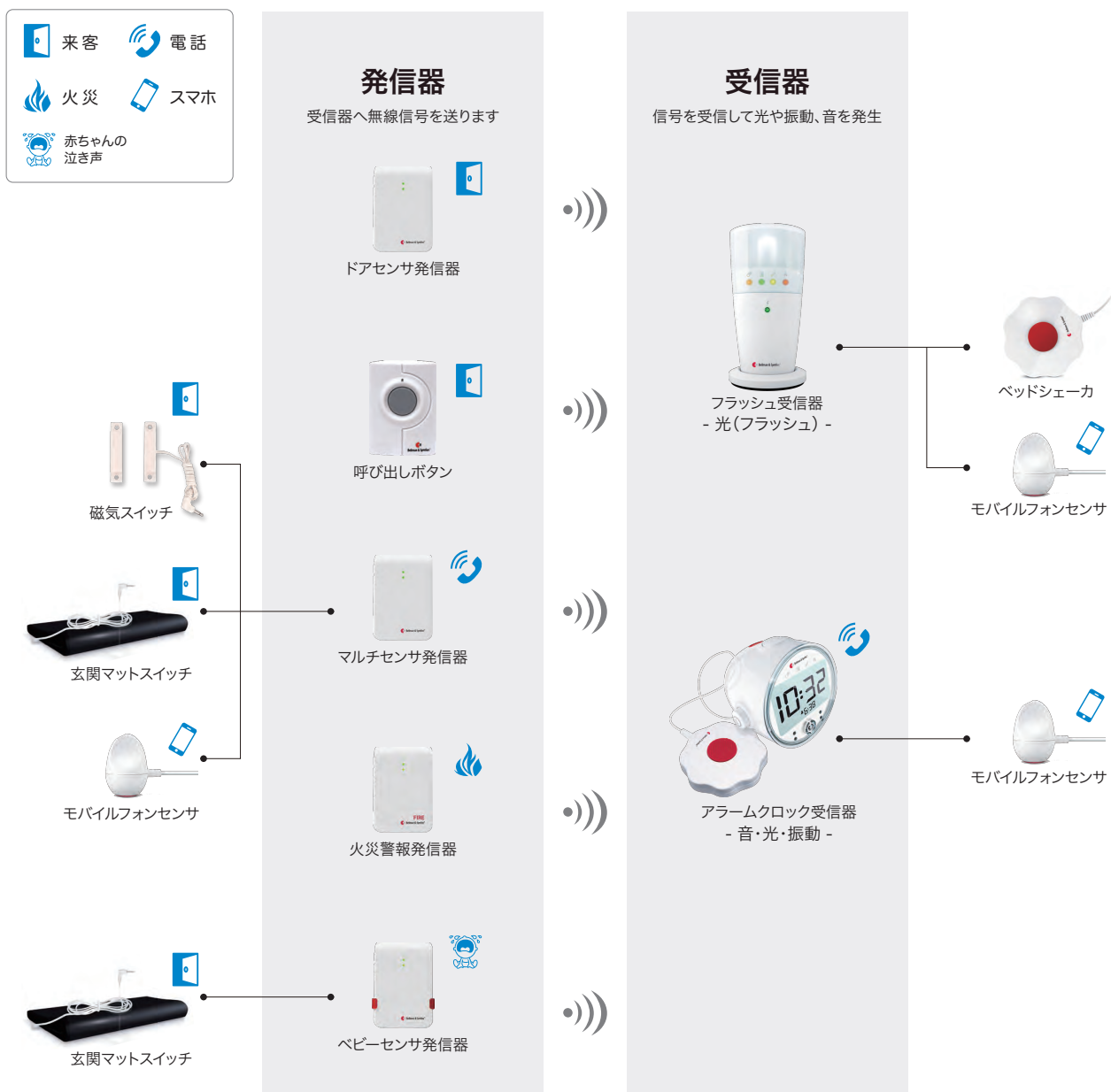

全ての発信器の信号を1つの受信器で受信できます。
また、発信器が1つ、受信器が各部屋にある場合でも、全ての受信器が反応します。

ベルマンビジットシステム

発信器 センサが反応すると、受信器へ無線信号を送ります。

来客を通知



ドアセンサ発信器


品番: BE1411 **¥24,800** (非課税)
単品購入の場合 ¥27,280 (税込)

ドアチャイムやインターホンの音を記憶するので誤作動がありません

ドアチャイムやインターホンの音源近くに設置し、チャイム音を感知すると受信器に対して無線信号を発信して来客をお知らせします。

サイズ	100 x 65 x 25 mm
重量	120 g
電源	単3アルカリ x 2
付属	外部マイク: 750mm

※ チャイム音の種類によっては記憶ができない場合がございます。その場合は【呼び出しボタン】(P5)をご利用ください。
※ コードが届かない場合は、別途2500mmの外部マイクも販売しております(【BE9199】価格¥2,600 非課税)。

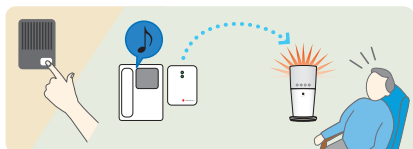

呼び出しボタン

品番: BE1420 **¥18,700** (非課税)
単品購入の場合 ¥20,570 (税込)


発信器付きドアチャイム
室内での呼び出し装置としても使えます

インターホンがないお宅はドアベルを玄関ドアの外側に設置するだけ。また、室内のドアに付ければ呼び出し装置としても重宝します。

小型・軽量で、乾電池で約2年の長寿命です。

サイズ	66 x 48 x 23 mm
重量	50 g
電源	電池: 6V x 1 ※ 稼働時間の目安: 約2年 (使用頻度により異なります)

※ 雨風に晒される場所での使用はできません。

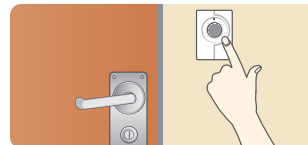

電話/FAXを通知



マルチセンサ発信器

品番: BE1431 **¥21,000** (非課税)
単品購入の場合 ¥23,100 (税込)

電話/FAXの着信を感知します
各種センサを直結できるマルチ発信器

家庭用電話回線を付属の分岐コネクタと接続して、電話/FAXの着信を感知。その他各種センサーが直結できます。

サイズ	100 x 65 x 25 mm
重量	120 g
電源	単3アルカリ x 2

【接続可能機器】

- 玄関マットスイッチ (P7)
- 磁気スイッチ (P7)
- モバイルフォンセンサ (P7)

火災を通知



火災警報発信器

品番: BE1431F **¥21,000** (非課税)
単品購入の場合 ¥23,100 (税込)

火災警報器に連動して警報を感知、発信

移報接点付住宅用火災警報器 (P9) と連動させて使用します。住宅用火災警報器の設置は法令により義務付けられています。

サイズ	100 x 65 x 25 mm
重量	120 g
電源	単3リチウム x 2



赤ちゃんの泣き声を通知



ベビーセンサ発信器

品番: BE1491 **¥21,000** (非課税)
単品購入の場合 ¥23,100 (税込)


赤ちゃんの側に置くだけ
赤ちゃんの泣き声を感知します

赤ちゃんの泣き声の大きさや、設置距離により感度を3段階に調整できます。泣き声の大きさは3段階、泣き声の長さは1秒・10秒・30秒に設定可能です。

サイズ	100 x 65 x 25 mm
重量	120 g
電源	単3アルカリ x 2

【接続可能機器】

- 玄関マットスイッチ (P7参照)

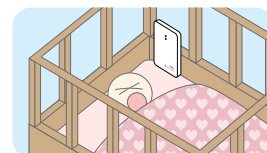

受信器 発信器からの無線信号を受信して光や振動、音で通知します。



給付対象商品 屋内信号装置 フラッシュベル

部屋のどこにいても気づける! ろう者にはかかせない1台
主要な部屋に置けば安心

フラッシュ受信器

品番: BE1441 ¥31,300 (非課税)

強力なフラッシュライトでお知らせ
部屋のどこにいても気づくことができます

一般電話回線に有線で繋げることで、電話/FAXの着信を感知。【モバイルフォンセンサ】(P7)を繋げて携帯電話の感知もできます。

壁にかけて使用したい場合は、専用壁掛け金具【BE9075】¥2,000(非課税)も別途ご用意しています。

※ 分岐コネクタ及び電話線は付属しません

サイズ	φ70 x 145 mm
重量	315 g
電源	ACアダプタ 7.5VDC、1,500mA




カラーキャップ 赤 BE9164 黄 BE9166
各¥3,000(非課税) 青 BE9165 白 BE9167

単品購入の場合 ¥3,300(税込)

ベッドシェーカ(P7)

品番: BE1270BV

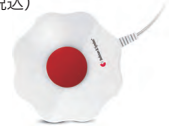

朝が弱い人に最適! 目覚まし時計型受信器

アラームクロック受信器

品番: BE1580 ¥41,600 (非課税)

ベッドシェーカ付き目覚まし時計型
フラッシュと徐々に増幅するアラーム音

一般電話回線に有線で繋げることで、電話/FAXの着信を感知。【モバイルフォンセンサ】(P7)を繋げて携帯電話の感知もできます。停電時にも内蔵充電電池によりベッドシェーカ未使用で約8時間作動します。

※ 分岐コネクタ及び電話線は付属しません

本体	
サイズ	108 x 121 x 92 mm
重量	390 g
電源	ACアダプタ 7.5VDC、1,000mA NiMH 充電電池内蔵
ベッドシェーカ(BE1270BV)	
サイズ	φ88 x 27 mm
重量	120 g
コード	2,000 mm

ベルマンビジットシステム

今やスマホは必須アイテム
置くだけ簡単センサ



モバイルフォンセンサ

品番: BE9250 **¥9,600** (非課税)
単品購入の場合 ¥10,560 (税込)

スマートフォン・タブレット・携帯電話などの着信時の光を感知します

スマートフォンやタブレットなどのディスプレイに乗せて使います。着信時の液晶の光を感知します。

コード	センサ部 : 120 mm バッテリー部 : 100 mm
電源	単4アルカリ x 1

【接続可能機器】

- マルチセンサ発信器 (P5)
- フラッシュ受信器 (P6)
- アラームクロック受信器 (P6)

固定電話/FAX/スマホの
着信を通知



ベルマンアラームクロックスペシャル
(ベルマンアラームクロックプロ + モバイルフォンセンサ)

品番: BE1390 **¥30,000** (非課税)

スマホの通知、一般電話回線、FAX着信を通知するフラッシュライト付き高機能型アラームクロック

ベルマンアラームクロックプロの仕様

- アラーム時刻にフラッシュライト
- 電話回線に繋げて電話/FAXを通知
- 停電時に必要なバックアップ電池

停電時にも内蔵充電電池によりベッドシェーカ未使用で約8時間作動します。

※ 接続可能な電話回線は一般電話回線のみです
※ 電話機および分岐コネクタ、電話線は製品には含まれません

本体	
サイズ	108 x 121 x 92 mm
重量	390 g
電源	ACアダプタ 7.5VDC, 1,000mA NiMH 充電電池内蔵
付属	ベッドシェーカ

マルチセンサ発信器を接続して来客を伝える
家でもお店でも使えるセンサ



磁気スイッチ

品番: BE9023 **¥2,800** (非課税)
単品購入の場合 ¥3,080 (税込)

ドアの開閉を感知します
来客や防犯目的でも使用できます

ドアや窓に設置します。2つの磁気スイッチが離れることで感知します。来客はもちろん、防犯にも使用されます。

サイズ	65 x 25 x 13 mm
重量	25 g
コード	500 mm

【接続可能機器】

- マルチセンサ発信器 (P5)



玄関マットスイッチ

品番: BE9026 **¥12,000** (非課税)
単品購入の場合 ¥13,200 (税込)

マットを踏む圧力を感知します
お店などでも使用されます

戸口前にマットを敷きます。マットに3kg以上の重量がかかると感知します。


※ 雨風に晒される場所での使用はできません。

サイズ	540 x 395 mm
重量	255 g
コード	2,000 mm

【接続可能機器】

- マルチセンサ発信器 (P5)
- ベビーセンサ発信器 (P5)

ベルマンビジット受信器に接続
振動で起こしてくれる重要機器

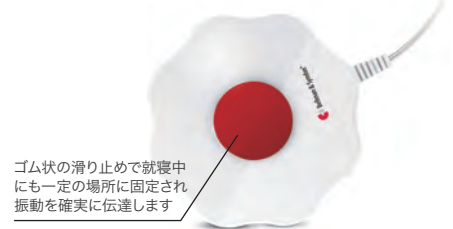

ゴム状の滑り止めで就寝中にも一定の場所に固定され振動を確実に伝達します

ベッドシェーカ

品番: BE1270BV **¥5,000** (非課税)
単品購入の場合 ¥5,500 (税込)

枕やシーツの下に設置
強力な振動で起こしてくれます


枕やシーツの下などに置いて使用。振動で起こしてくれます。

サイズ	φ88 x 27 mm
重量	100 g
コード	2,000 mm

【接続可能機器】

- フラッシュ受信器 (P6)
- アラームクロック受信器 (P6)

ベルマンビジットシステムの家庭内での使用例

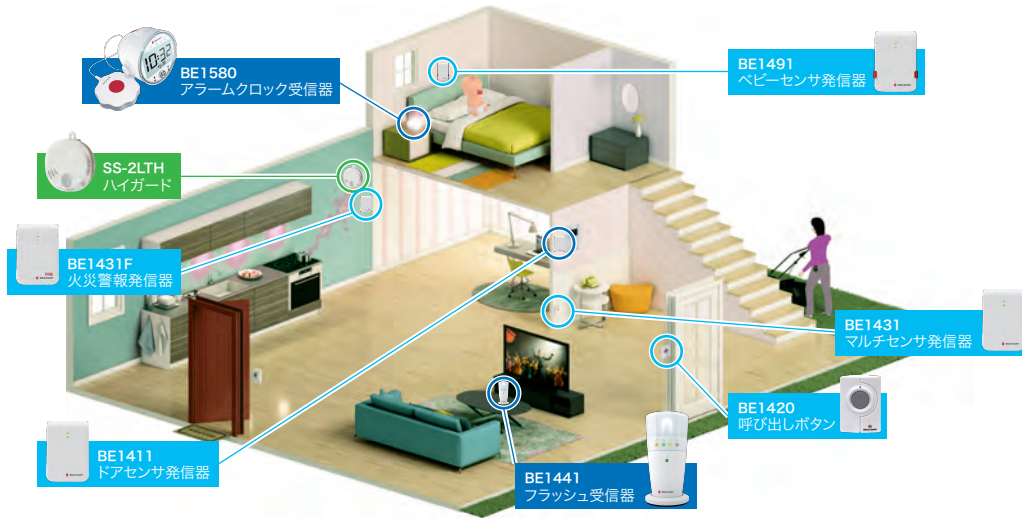

給付制度を利用して自己負担を抑えたシステムを導入
 ※最大87,400円の支給を受けることができます。

来客を複数の部屋へ通知



合計：87,400円(非課税)

火災・来客・赤ちゃんの泣き声を通知



※ 別途、火災警報器 (P9)が必要です。 合計：92,000円(非課税)

来客・電話/FAXの通知、目覚まし



合計：87,400円(非課税)

火災・来客の通知、目覚まし



※ 別途、火災警報器 (P9)が必要です。 合計：87,400円(非課税)

福祉・介護用品としての使用例

ドア開閉感知セット



要介護者の居室の出入口のドアに磁気スイッチと発信器を設置。
 ドアを開けた時に受信器が光・音・振動で通知します。

品番：JI-BE-JSET 合計：65,400円(非課税)
 TAISコード：00544-000035

徘徊感知マットセット



ベッドの下や居室の出入口に玄関マットと発信器を設置。要介護者がベッドから降りたり居室から出ようとしてマットを踏むと受信器が光・音・振動で通知します。

品番：JI-BE-GSET 合計：74,600円(非課税)
 TAISコード：00544-000034

屋内信号装置に接続できる移報接点付き火災警報器


屋内信号装置と連動して、火災を光や振動で通知します。

< 住宅用火災警報器の設置は法令により義務付けられています >

ホーチキ無線連動式住警器

1つの警報器が作動すると、全部屋の火災警報器が作動します。
親器、子器など計15台まで増設可能(煙式と熱式の組み合わせ可)


- 約90dBの大音量警報音と音声で火災発生をお知らせ
- 警報音は幅広い年齢層に聞き取りやすい、音域が広いスイープ音
- 2段階で最大音量となる段階鳴動機能

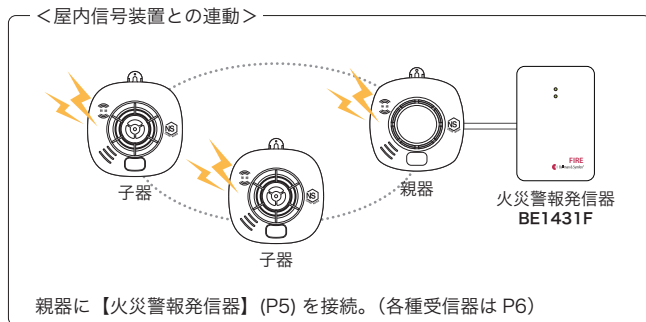

ハイガード

単独型の火災警報器、部屋数の少ない住宅などに便利です。
台所、寝室、階段、廊下などに簡単設置可能な天井/壁掛兼用

- 約90dBの大音量警報音と音声で火災発生をお知らせ
- 警報音は幅広い年齢層に聞き取りやすい、音域が広いスイープ音
- 2段階で最大音量となる段階鳴動機能

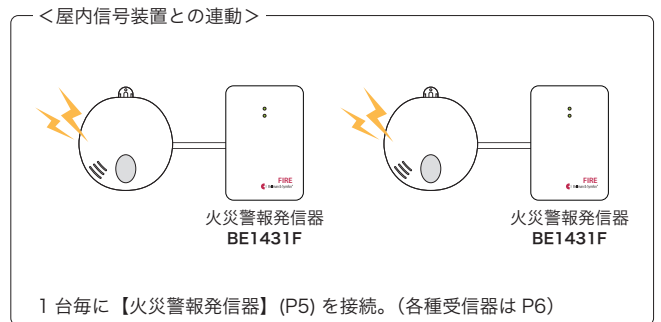

無線連動式住警器セット **煙式**

品番:SS-2LRH_2LR-10 **¥34,100** (税込)

火災報知器の親器と子器のセット

サイズ	親器/子器:100x100x46.7 mm
重量	親器/子器 155 g
電源	内蔵リチウム電池 (約10年間持続)



ハイガード **煙式** (移報接点付)

品番:SS-2LTH **¥8,800** (税込)

品番:SS-2LTH-2 (2個組) **¥15,787** (税込)

サイズ	94.5 x 94.5 x 27.5 mm
重量	100 g
電源	内蔵リチウム電池 (約10年間持続)



無線連動式子器 **煙式**

品番:SS-2LR-10 **¥14,850** (税込)

連動するには親器が必要です。

サイズ	100x100x46.7 mm
重量	155 g
電源	内蔵リチウム電池 (約10年間持続)



ハイガード **熱式** (移報接点付)

品番:SS-FLH **¥8,800** (税込)

品番:SS-FLH-2 (2個組) **¥15,787** (税込)

65°Cの熱を感知すると警報。一時的な熱に反応した場合、熱が下がると元の状態に自動復帰します。

サイズ	100 x 100 x 42 mm
重量	110 g
電源	内蔵リチウム電池 (約10年間持続)



無線連動式子器 **熱式**

品番:SS-FK-10 **¥14,850** (税込)

65°Cの熱を感知すると警報。一時的な熱に反応した場合、熱が下がると元の状態に自動復帰します。連動するには親器が必要です。

サイズ	100x100x46.7 mm
重量	145 g
電源	内蔵リチウム電池 (約10年間持続)

ベルマンビジットシステムと連動させるためには、このページに掲載されている移報接点付き(外部出力)の住宅用火災警報器が必要です

※ ホーチキ無線連動式住警器類は、NS消防法令適合品、住宅性能表示制度対応品

※ 住宅用火災警報器の設置は法令により義務付けられています。(各市町村の火災予防条例により設置場所は異なります)

強力なベッドシェーカの振動と大音量アラームで時刻をお知らせ ベルマンアラームクロック

簡単操作

ワンタッチで時間合わせ、アラーム時刻を設定ができる簡単操作

音程が変わるアラーム音

アラーム音は多くの人が聞き取れるよう音程(約5段階)を変えながら繰り返し鳴ります。

強力振動のベッドシェーカ

強力なベッドシェーカの振動でアラーム時刻をお知らせ

起きやすいスヌーズ

アラームの間隔が9・7・5・3・2分と徐々に間隔が短くなるスヌーズ

※ スヌーズとはアラームを止めても、再び鳴る機能

大音量アラーム

鳴り始めから徐々に増幅し、最大100dBの大音量アラーム



振動式時計



ベルマンアラームクロック プロ

品番: BE1370 ¥24,200 (税込)

一般電話回線に繋げて電話やFAX着信も通知できるフラッシュライト付き高機能型アラームクロック

- アラーム時刻にフラッシュライト
- モバイルフォンセンサを接続可能(スマホの着信)
- 一般電話回線に繋げて電話/FAXを通知
- 停電時に必要なバックアップ電池内蔵

電話/FAXの着信を感知。【モバイルフォンセンサ】(P7)を繋げてスマホの感知もできます。停電時にも内蔵充電電池によりベッドシェーカ未使用で約8時間作動します。

※ 接続可能な電話回線は一般電話回線のみです
※ 電話機および分岐コネクタ、電話線は製品には含まれません

本体	
サイズ	108 x 121 x 92 mm
重量	390 g
電源	ACアダプタ 7.5VDC, 1,000mA NiMH 充電電池内蔵
ベッドシェーカ	
同ページ BE1270BV	

モバイルフォンセンサ

品番: BE9250

スマホ・タブレット・携帯電話などの着信時の光を感知します。(P7)



ベルマンアラームクロック クラシック

品番: BE1350 ¥15,400 (税込)

スタンダードタイプのアラームクロック

ベッドシェーカの付いた目覚ましの機能で十分な方はクラシックがおすすめ。特に新生活を始める方に大変人気のある商品です。

本体	
サイズ	108 x 121 x 92 mm
重量	345 g
電源	ACアダプタ 7.5VDC, 1,000mA
ベッドシェーカ	
同ページ BE1270BV	



ベッドシェーカ

品番: BE1270BV ¥5,500 (税込)


ベルマンアラームクロックには付属しています。破損した時の交換用としてご購入ください。

サイズ	φ88 x 27 mm
重量	100 g
コード	2,000 mm

プロとクラシックの性能比較

	クラシック	プロ
バックライト	○	○
スマートスヌーズ	○	○
マルチトーンアラーム音	○	○
フラッシュライト	×	○
バックアップ電池	×	○
電話線接続	×	○
モバイルフォンセンサ	×	○

ポケットサイズで持ち運び簡単！
 スマホの着信とアラームで振動するワイヤレスベッドシェーカ

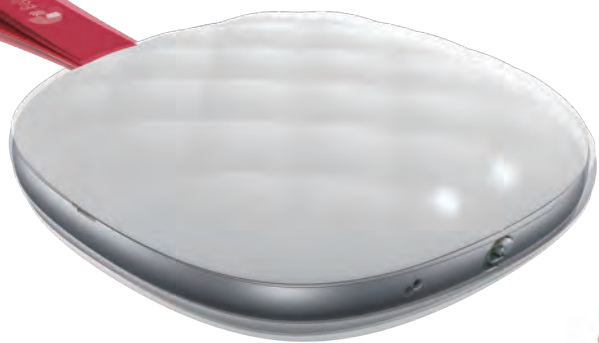

給付対象商品

- 屋内信号装置
- 携帯用信号装置
- フラッシュベル

専用アプリでスマホと連動する
 ワイヤレスベッドシェーカ

■ Vibio -ビビオ-

品番: BE1221 ¥12,100 (税込)

スマートフォンとBluetoothで接続
 強力な振動で起こすワイヤレスシェーカ

- iPhoneでもAndroidでも使用可能
- アラーム時刻及び、スマホの着信/通知をお知らせ
- 専用アプリのダウンロードは無料
- アラーム時刻はいつでも設定可能
- 専用アプリで簡単操作

サイズ	94 x 94 x 27 mm
重量	153 g
電源	充電電池内蔵(USB充電)



振動の強さ

優



強

1つの時計で2人が起きられる 目覚まし時計



- 強力フラッシュ & 大音量アラーム
- 見やすい時刻表示、簡単アラーム設定
- 2つのベッドシェーカがそれぞれの起床時間に対応

給付対象商品 **屋内信号装置**

セントラルアラームクロック

品番: CA-ALM2

¥19,800 (税込)

2つのベッドシェーカを別々のアラーム時刻に振動
大音量のアラーム音とフラッシュ

サイズ	約 165 x 106 x 60 mm
重量	335 g
電源	9V 1,000mA



品番: GM-JWNS-B



品番: GM-JWNS-W



携帯型振動式目覚まし時計最強の振動 振動・光・音の組み合わせで確実に起きる!

ウェイクン シェイク・ボイジャー V2 ¥11,000 (税込)

LED懐中電灯で災害時にも安心
据え置きでも、持ち運びにも便利な高機能時計

- 超強力な振動
- 選べる振動、音、光の組み合わせ
- 振動の強さやスヌーズ間隔の調整
- 夜間に見やすいバックライト
- 懐中電灯として使えるLEDライト
- 便利なトラベルケースとクリップ付属

サイズ	95 x 90 x 30 mm
重量	110 g
電源	計時用: 単4アルカリ電池 x 1 振動用: 単3アルカリ電池 x 2



自立スタンドで据え置き型時計としても使用可

時計本体が振動する携帯型目覚まし時計 旅行や出張先に手軽に持ち運べます

ビブラ

品番: SI-VA3

¥13,200 (税込)

目覚まし以外にカウントダウンタイマや
LED懐中電灯としても使える多機能時計

- 8分毎にアラームを繰り返すスヌーズ機能(7回まで)
- アラームは音+振動/音のみ/振動のみ
- アラーム音程調整(3段階)
- カウントダウンタイマ
- 室温表示
- 非常時に便利なLED懐中電灯を搭載

サイズ	118 x 71 x 27 mm
重量	140 g
電源	単3アルカリ電池 x 3

振動式腕時計は通勤電車のうっかり寝過ごし対策にも便利。



パールホワイト
品番: SI-VQ500JWL



ブラック
品番: SI-VQ500JBM

アナログ高級タイプの腕時計

■ バイブラクオーツJ ¥14,300 (税込)

一見振動式時計には見えない洗練されたデザインと、高級革バンドが人気の秘密。スーツやドレスなど大人の装いにぴったり合います。またカジュアルな服装と合わせてもおしゃれです。

- アラームは誤差が発生しにくいデジタル制御
- 日常生活防水対応

サイズ	47 x 30 x 14.35 mm
重量	64.5 g
電源	計時用:SR626W 約2年 アラーム用:CR2032 約1年(1日1分の振動)
バンド	穴留式 / ピンバックル
防水性能	日常生活防水

振動式時計



シルバー
品番: JI-VW-S



ブラック
品番: JI-VW-B



ゴールド
品番: JI-VW-G

< 数量限定販売 >なくなり次第販売終了

簡単操作で誰でも使える
アナログタイプの振動時計

バイブラウォッチ ¥11,000 (税込)

性別を問わないクラシックなデザイン
アラーム時刻を振動 / 音でお知らせ
3つのボタンで簡単操作

- 現在時刻合わせは電頭を回すだけ
- アラーム時刻はボタンを押すだけ
- 振動と音の切り替えもワンタッチ

サイズ	約 38 x 35 x 11 mm
重量	45 g
電源	SR927W



紫花柄
品番: GL-VM-LPL



白
品番: GL-VM-SWH



黒
品番: GL-VM-LBK

小型・軽量で女性や子供に人気
カジュアルタイプの振動腕時計

■ バイブラライト Mini ¥11,000 (税込)

幅30mmで、25gと軽量。女性やお子様にも最適な大きさです。
誤設定防止のロックモード付なのでお子様の使用でも安心です。
「振動」と「音」両方設定可能です。12個まで登録できるアラームや
カウントダウンタイマを強力な振動でお知らせします。
5気圧日常生活防水機能付き。

サイズ	30.5 x 38.5 x 12.3 mm
重量	25 g
電源	CR1632 リチウム電池
バンド	ピンバックル
防水性能	日常生活防水



給付対象商品 補聴器対応電話機

難聴者・高齢者用電話機 音量増幅と音程調整でより明瞭な音声に 大きなボタンで押しやすい高性能電話機

ジャンボプラスAP ジャンボプラス(HD60J)後継機

品番: GM-AP60JW ¥30,800 (税込)

- 受話音量を最大60dB増幅
- 受話音程も自由に調整
- 着信音量調整可能/着信音は3つ選択可能
- Tコイル内蔵補聴器に対応するTコイル内蔵受話器
- 9個のワンタッチダイヤル登録/3個の緊急連絡先登録
- ハンズフリー通話対応


サイズ	210 x 190 x 100 mm	※ 技術基準適合認定番号「A20-0205001」
重量	735 g	※ 一般電話回線専用
電源	ACアダプタ(12VDC)	

ジャンボプラスAP専用M-Link(マイク付)

品番: GM-CLHook1 ¥8,580 (税込)

- 受話器を持たずにジャンボプラスAPで通話できます。

※ジャンボプラスAP専用M-Linkの接続端子は2.5mm

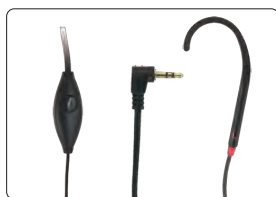

給付対象商品 フラッシュベル

振動を感知して点滅する着信通報装置 電話/FAX/スマホ/タブレット/携帯対応

セルフォンリング

品番: SI-RF200 ¥15,400 (税込)

- 着信感知後、リセットするまでランプは点滅し続けます
- 一般電話回線に直結して固定電話の着信やFAXをお知らせ
- 振動しないタブレットも付属の着信感知ケーブルで通知
- USB充電機能付で、端末の充電をしながら使用できます

サイズ	116 x 85 x 90 mm
重量	165 g
電源	ACアダプタ(9VDC、1,000mA)

※ 技術基準適合認定番号「A14-0215001」

ベッドシェーカ

品番: SI-BS100 ¥5,500 (税込)

枕やシーツの下などに置けば振動で起こしてくれます。

サイズ	φ90 x 26 mm
重量	100 g
コード	1,900 mm

※ スマートフォン・タブレットは付属しません
※ ベッドシェーカは別売です



電話機・FAX兼用、簡単に接続できる音量増幅器

テレアンプⅢ

品番:SI-UA45

¥15,400 (税込)

- 受話音量を+30dB音量増幅(ブースト時最大+45dB)
- 多くの電話機・FAX機に接続できる切替スイッチ付
- 会話終了後、約12秒後に自動停止で電池消耗を軽減



※ 骨伝導機能付、ワイヤレスなど標準4極4芯コネクタを持たない受話器付電話機には接続できません

※ ブーストボタンを押している間は、こちらの声が15dB程度の音量で送信されます

サイズ	116 x 76 x 44 mm
重量	130 g
電源	ACアダプタ、または9Vアルカリ電池(別売)約3ヶ月(1日20分程度の使用)

テレアンプⅢ用ACアダプタ(B兼用)

品番:UA-ADP

¥4,400 (税込)

電源	9VDC 1,000mA
----	--------------



ヘッドセット接続可能なテレアンプⅢ

テレアンプⅢ B

品番:SI-UA50

¥22,000 (税込)

- 受話器とヘッドセットを接続できるビジネス専用モデル
- ビジネスフォンを含むほとんどの電話機に利用可能
- 業務用、社内の電話交換業務などにも最適

※ ヘッドセットの取扱はございません

サイズ	116 x 76 x 44 mm
重量	130 g
電源	ACアダプタ、または9Vアルカリ電池(別売)約3ヶ月(1日20分程度の使用)



簡単に受話器に着脱可能な携帯式電話音量増幅器

マイアンプⅡ

品番:SI-UA30

¥6,050 (税込)

- 最大30dBまでの受話音量増幅(中程度難聴に最適)
- ON/OFFスイッチ付き回転式ダイヤルで簡単音量増幅
- Tコイル内蔵補聴器で使用可能
- 便利な携帯用ソフトケース付き

※ 親子電話機の子機・携帯電話機などでは無線電波の影響で雑音が多く使用できない場合があります

サイズ	65 x 65 x 28 mm
重量	45 g
電源	単4アルカリ電池 x 2 約40日間(1日10分程度使用)

補聴器をしたまま快適な通話! 受話器用イヤークッション

ミミコンフォート (10個入)

品番:JI-MMC

¥3,520 (税込)

- 皮膚に優しく心地良い天然素材のラテックススポンジ
- 受話器が補聴器に直接触れません
- 補聴器のハウリング防止に効果的

※ 天然素材のため色合いが異なることがあります

※ 本製品は消耗品ですので1年保証対象外です

サイズ	φ40 x 10 mm
重量	2 g



小規模な会議室やご家庭に簡単設置 室内設置用ヒアリンググループ

室内にループケーブルを敷くだけで、クリアな音声が届きます。
会議室、学習教室、セミナー会などへの持ち運びにも便利です。



■ ループヒア600フルセット

品番: JI-SET0600

¥66,000 (税込)

広範囲をサポートする38m! 学校のクラスもすっぽり入ります
2つの無線マイクが小規模会議やイベント会場で活躍

- 2本の無線マイクは同時に接続できるので、発言者が複数いても大丈夫
- 音量増幅アンプで音声を増幅可能
- 音響機器接続用ケーブルを利用して、音楽や録音した音声、またテレビやラジオの音声も視聴可能
- 固定電話の回線に繋げて電話着信も受信します

ループヒア600

品番: GM-LH600

¥30,800 (税込)

無線マイク/アンプが付属しないタイプ

ヒアリンググループ本体	
サイズ	150 x 150 x 48 mm ケーブル長: 38m(約15畳分)
重量	75 g
電源	15VDC
付属	専用ピンマイク/オーディオケーブル/RCAコネクタ/電話線

マイク受信機/アンプ		無線マイク	
搬送波周波数	808.625Mhz、809.125Mhz	電源	単3形アルカリ乾電池 または 単3形ニッケル水素電池 または 単3形リチウム電池 x 1
電波到達距離	約20m		
電源	DC12V(0.5A) ACアダプター	電池寿命	約30時間
寸法	134 x 43 x 132mm	サイズ	53 x 228 mm
重量	524g	重量	192 g



ヒアリンググループの音声は Tコイル内蔵の集音器/補聴器で受信

ヒアリンググループの磁気で送られる音声は、Tコイルで受信します。Tコイル内蔵の集音器/補聴器が必須です。
【ベルマンミノ】(P20)はTコイル内蔵のデジタル集音器。
ヒアリンググループの音声はもちろん、通常の集音器としてもお使い頂けます。

小範囲のみに音声が届く 対話用ヒアリングループ

東京都内区役所障害福祉課／各県市役所／高松市内循環バス一部路線など
少人数の集まりや各種窓口・カウンターなどで広く利用されています



※ ループヒア101実績



Tコイル付補聴器

ベルマンミノ
(BE2030)

充電式で持ち運び可能なヒアリングループ

■ ループヒア102

品番: GM-LH102

¥49,500 (税込)

マイク入力、磁気の感度の調整ができるため、より広範囲で音声の受信が可能。

- ポータブルタイプなのでいつでも好きな場所で、明瞭な音声の聴き取りが可能
- ベルマンミノ (P20) やTコイル内蔵の補聴器を使用することで雑音のない明瞭な音声を聴くことが可能
- 約8時間稼働(フル充電時)

サイズ	250 x 220 x 70 mm
重量	750 g
電源	ACアダプタ (15VDC、1,000mA)

SET ループヒア102/ベルマンミノ

■ カウンタヒア102

品番: JI-SET0102

¥90,200 (税込) 【¥1,000お得】

シガーソケットで使えるヒアリングループ

ループヒア160

¥42,900 (税込)

シガーソケットで動作する車用ヒアリングループ
小スペースに設置可能な小型軽量モデル

ボードタイプはアンプに取り付けて自立が可能。アンプと離せば非常にコンパクトです。

シートタイプは主に座席に敷いて使用します。

サイズ	アンプ : 140 x 70 x 35 mm ボードアンテナ : 148 x 148 x 10 mm シートアンテナ : 350 x 335 mm
電源	シガーソケット (12VDC、1A)

※ シガーソケットはACアダプタに変更できます。
※ ピンマイクはスタンドマイクに変更できます。
ご注文時にご相談ください。



シガーソケット スタンドマイク



ループヒア160ボードタイプ

品番: GM-LH160W

省スペースに最適



ループヒア160シートタイプ

品番: GM-LH160C

座席に敷いて使用

補聴器・人工内耳の方専用

磁気誘導
コイル型

イヤホン

音楽

テレビ

動画

通話

ビデオ
通話



Tコイル内蔵の補聴器や人工内耳をお使いの方がテレビや音楽を聴いたり、スマホで通話ができる簡易型ヒアリングループです。

< 片耳用 >

M-Link CL Mono



品番:CL-Hook7
¥7,480 (税込)



- マイク付 -
品番:CL-Hook9
¥8,580 (税込)

	マイク無	マイク付
サイズ	フック:83.5 mm	
重量	10g	15g
コード	約1,000 mm	約1,200 mm

※ マイク付きモデルはiPhone・Android両対応のアダプタ付属

< 両耳用 >

M-Link CL Stereo



品番:CL-Hook3
¥10,450 (税込)



- マイク付 -
品番:CL-Hook8
¥11,550 (税込)

	マイク無	マイク付
サイズ	フック:83.5 mm	
重量	10g	15g
コード	約1,000 mm	約1,200 mm

※ マイク付きモデルはiPhone・Android両対応のアダプタ付属

< 片耳用+イヤホン >

Mリンク・プラス



品番:TC2003
¥6,600 (税込)

サイズ	フック:58 mm イヤホン:φ12 x 18 mm
重量	10 g
コード	約1,200 mm



Mリンク延長コード

品番:JI-KM-A3-50 ¥2,200 (税込)

サイズ	プラグ部:3.5 mm
重量	110 g
コード	5,000 mm

対応:M-Link CL Mono(マイク無し)/M-Link CLStereo(マイク無し)/Mリンク・プラス

首にかける高性能ネックループ

ミュージックプレイヤーや集音器の音声がよく聴こえます

ベルマンネックループ

品番:BE9159

¥9,900 (税込)

- Tコイル内蔵補聴器をしたまま音楽やテレビが聞ける
- 断線防止のため、強い力がかかると線が抜ける安心設計
- 集音器と接続し、Tコイル内蔵補聴器で聴くと音声がよく聴こえます

サイズ	ケーブル:900 mm ループ径:220 mm (ストレート長:700mm)
重量	60 g

※ 断線防止機能付きですが、強く引っ張ると切れる場合がございます。

会話や講演、テレビの音声や音楽を集音&音量増幅 ベルマンのデジタル集音器



指向性/無指向性(全指向性)の切り替え可能 小型で軽量のTコイル内蔵集音器

■ベルマン ミノ

品番: BE2030 **¥41,800** (税込)

- 集音マイクは指向性 / 無指向性(全指向性)を選択できてより効率的で明瞭な集音が可能
- 内蔵のTコイルにより磁気ループのある施設で磁気誘導による集音が可能
- 音量は10dB刻みで最大45dBまで増幅(9段階調整)
- 音程(40~10KHz)は5段階まで調整可能


音声文字化

SET 入力コントローラ付き音声認識ケーブル付き

■ベルマン ミノ+

品番: BE2030+ **¥46,750** (税込) 【¥500お得】

サイズ	99 x 48 x 22 mm
重量	75 g
電源	リチウムイオン充電電池 約2.5時間の充電で約18時間 (使用頻度による)
付属品	イヤホン(BE9124) イヤホンマイクロセット

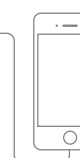

今週の平日で午後お時間ござい
明日火曜日と水曜日なら3時以降
そうしましたら、
明日の3時から4時の間でいて
担当者がその時間にお邪魔しま



スピーチがはっきり聞こえる無指向性(全指向性)マイク内蔵 テレビ、スマホ、会話の音声を聞き取るデジタル集音器

■ベルマン マキシプロ

品番: BE2021-C **¥37,400** (税込)

- 音量は10dB刻みで最大45dBまで増幅(9段階調整)
- 音程(40~10KHz)は5段階まで調整可能
- スマホとBluetoothで接続し、音楽や通話音声を増幅します

音声文字化

SET 入力コントローラ付き音声認識ケーブル付き

■ベルマン マキシプロ+

品番: BE2021-C+ **¥42,350** (税込) 【¥500お得】

サイズ	140 x 45 x 27 mm
重量	127 g
電源	内蔵リチウムイオン充電電池
付属品	マイク付きイヤホン(BE9229)



※ テレビから音をストリーミングするには、マキシプロTVストリーマが必要です



マキシプロでテレビの音声をストリーミング

■ベルマン マキシプロTVストリーマセット

品番: BE8054-C **¥52,800** (税込)

テレビのRCA出力または光出力から音声を取り込み
Bluetoothでベルマンマキシプロに送信します

※ マキシプロTVストリーマは単品販売しておりません。
ご希望の場合、お問い合わせ下さい。

音声文字化

SET 入力コントローラ付き音声認識ケーブル付き

■ベルマン マキシプロTVストリーマ+

品番: BE8054-C+ **¥57,750** (税込) 【¥500お得】



オプション類

ベルマン マキシ/ミノ



外部接続マイク

品番: BE9127 ¥3,300 (税込)

会議や講演、TVのスピーカ音を
集音する高性能マイク

サイズ	ケーブル: 5,000 mm
重量	23 g
その他	無指向性マイク



ケーブルキット

品番: BE9126 ¥7,150 (税込)

音響機器と接続するケーブル
キット

サイズ	ケーブル: 5,000 mm
重量	140 g
その他	2.5mm ステレオプラグ 3.5mm ステレオプラグ RCAアダプタ



ヘッドホン

品番: BE9122 ¥3,300 (税込)

取扱の簡単な高性能ヘッドホン

サイズ	ケーブル: 1,200 mm
重量	52 g



イヤホン

品番: BE9124 ¥3,300 (税込)

耳にぴったりフィットするイヤホン

サイズ	ケーブル: 1,200 mm
重量	14 g



ステトクリップ

品番: BE9125 ¥11,000 (税込)

120dBまで再生する高性能聴診
器型イヤホン

サイズ	ケーブル: 1,200 mm
重量	36 g



マキシプロ用 マイク付ヘッドホン

品番: BE9233 ¥3,300 (税込)

マキシプロ専用の取扱の簡単な
高性能マイク付ヘッドホン

サイズ	ケーブル: 1,200 mm
重量	52 g



マキシプロ用 マイク付イヤホン

品番: BE9229 ¥3,300 (税込)

マキシプロ専用の耳にぴったり
フィットするマイク付きイヤホン

サイズ	ケーブル: 1,200 mm
重量	14 g



温められた空気が補聴器の湿気を蒸発させます

お部屋の空気がリニューードライヤの吸気口から入ります



乾燥室と外部の温度差が対流を作り出し、外部へ湿気を追い出します

とても静か

乾燥剤不要の補聴器乾燥器

リニューードライヤ

品番: SL-DB100

¥13,200 (税込)

- 自然対流の熱(約45°C)で効果的に乾燥
- 乾燥剤や薬品を使わないので経済的
- 2個の紫外線LEDにより補聴器内部まで消毒・滅菌
- 使用中の電池残量を簡単に計測可能
- タイマーは季節や湿度に合わせて2、4、8時間から選択可能
- 紫外線は1時間で自動消灯
- 中敷き部分は取り外して洗浄が可能

※ 補聴器の変色を避けるため、紫外線LEDの使用は1日2時間以内推奨

サイズ	148 x 89 x 51 mm
重量	430 g
電源	ACアダプタ (12VDC、1,000mA)



取り外して
洗浄可能

テレビの音声を鮮明に耳元までお届けするワイヤレス補聴スピーカシステム

サウンドアシスト ブラック/ホワイト

品番: AT-SP767XTV BK/WH

¥28,600 (税込)

- ヘッドホン端子に付属のヘッドホンやMリンクを装着可能
- はっきり音がヘッドホンでも楽しめる軽量ヘッドホン付属
- 専用の光デジタルケーブルですぐに使えるかんたん接続
- とぎれにくいワイヤレスは最大約30m
- キッチンでも安心の防滴仕様(IPX2 相当)
- 大きな操作ボタンで簡単操作
- 約2~3時間の充電で約16時間の連続使用
- 電源切り忘れ防止



自分だけ音が聞き取りにくいとき



離れていて音が聞こえにくいとき



	スピーカ	ヘッドホン
サイズ	128 x 196 x 84 mm	サイズ 170 x 130 x 55 mm
重量	約630 g	重量 約60 g
電源	NiMH 充電電池	備考 出力音圧レベル: 93dB / mW 再生周波数帯域: 20~20,000Hz
備考	スピーカ: φ52mm x 2 連続使用: 約16時間	
送信機		
サイズ	36 x 180 x 77 mm	付属品
重量	約130 g	送信機用ACアダプター 角形光デジタルケーブル (1.5m/角形光プラグ) オーディオケーブル (1.5m/φ3.5mmステレオミニプラグ)
電源	ACアダプタ(6VDC)	
備考	周波数帯: 2.4GHz 到達距離: 直線見通約30m 入力端子: φ3.5mm ステレオミニジャック : 角形光デジタル端子	

※ 「はっきり音」はSRS Labs, Inc. が開発したSRS Dialog Clarity技術を採用
※ 付属するヘッドホンはシルバーになります

検温終了を振動でお知らせ ずれにくいアタッチメントがついた振動式体温計



シチズン振動体温計

品番:CTEB720VA

¥5,500 (税込)

検温終了を音と振動でお知らせする
フィット感抜群の振動体温計

- 専用アタッチメント「びたタッチメント」付
- 約30秒予測検温
- 大きく見やすい液晶とバックライト
- 防水はIPX7、JIS T 1140:2014による
- 収納ケース付属

サイズ	31.5 x 126.5 x 15 mm (アタッチメント装着時 35 x 128 x 18 mm)
重量	25.5 g 35 g (アタッチメント装着時)
電源	CR2025

給付対象商品 **屋内信号装置** **携帯用信号装置**

強力な振動・光・音でお知らせする呼び出し装置 30メートルほどの範囲で通信が可能



双方向&同時呼出し

お互いが呼び出し合える双
方向通信。何台あってもボタ
ン1つで同時呼び出し!

フィードバック機能

呼び出した相手に電波が届
いたことが分かるフィードバ
ック機能付き

簡単グループ通信

無線が届くグループに機器
を追加する場合、ボタンを長
押しするだけの簡単操作

双方向通信



複数台同時呼出し



ツーウェイウィンブル (2個セット)

品番:SI-2way winbr

¥16,500 (税込)

強力な振動で呼び出します
光と音はON/OFFの切り替え可能!

送信機能と受信機能が備わった双方向呼び出し器
が2個セットです。付属する充電器は1台です。

サイズ	30 x 54 x 88 mm
重量	56 g
電源	3.7V 300mA Li-ion 充電電池

充電器 (追加用)

品番:SI-2w_adapter

¥3,300 (税込)

枕の下に置く、深い眠りを誘う薄型ステレオスピーカ

スリープサウンド

品番:SI-PS200

¥22,000 (税込)

- 心地良い眠りのための薄型で理想的な設計
- 枕下からでもよく聞こえるステレオ音
- 28種類のホワイトノイズやナチュラルサウンドで安眠
- スマホ、音楽プレイヤー、テレビなどと接続して音声再生
- 30分までの音声をスリープサウンドに保存も可能
- 徐々に音量が小さくなるタイマ機能


サイズ	387 x 190 x 25 mm
重量	200 g
電源	ACアダプタ

※ 耳鳴りを治療する装置ではありません





リアルタイムで変換！音声認識で会話を記録 音声認識アプリ「声文字」 (こえもじ)

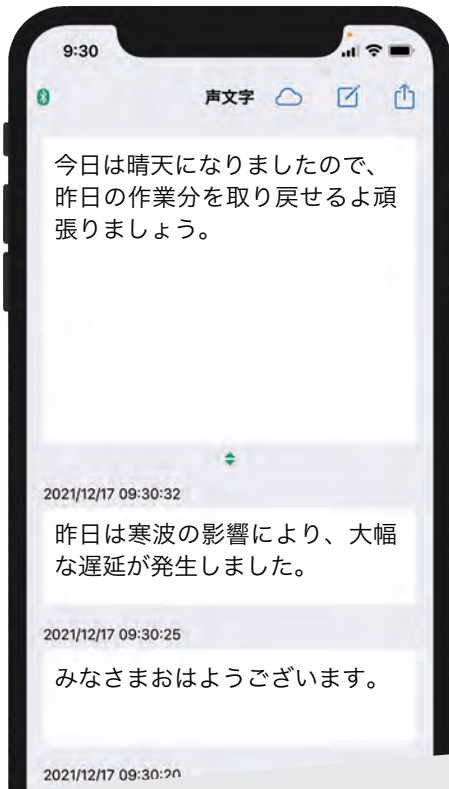

01 リアルタイム音声認識

音声をリアルタイムで文字に変換します。
認識する言語は複数の言語から選択できます。

02 リアルタイム翻訳機能

音声認識した言語を翻訳します。
翻訳する言語は複数の言語から選択できます。

03 文字化した会話の記録


文字化した会話は端末に記録（保存）、編集・削除ができます。メールやLINEなどに送信も可能です。

ビジネスプランは複数の端末で ライブ配信と共有ができます。



Biz 音声認識のライブ配信・共有

単一の音声認識を複数ユーザにライブ配信できるほか、複数端末でそれぞれの音声認識を共有できます。
PCでの閲覧・修正・保存ができます。CSV形式でのエクスポートも可能です。

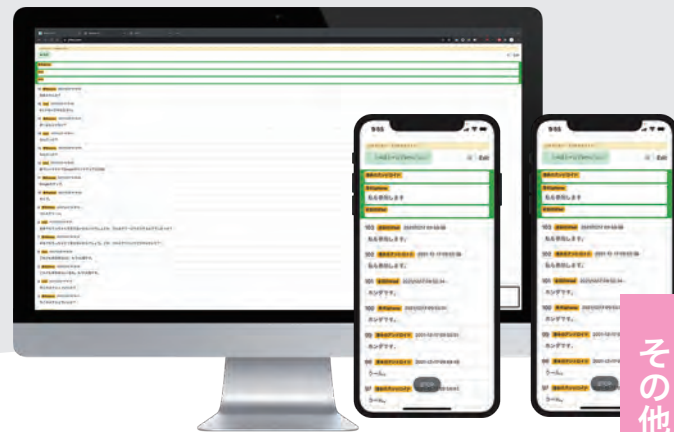

その他

ビジネスプラン

5端末 / 年 ¥159,500 (税込)
10端末 / 年 ¥297,000 (税込)

- 複数の端末を利用する
- 複数端末でライブ配信や共有の機能を利用する。
- 履歴をPCで閲覧したり、CSVで加工して使いたい。

パーソナルプラン

1端末 / 年 ¥33,000 (税込)

- 個人で使用する場合

意思が通じない煩わしさ解消

入力した文字を
読み上げます。

携帯会話補助装置


指先で会話ができる

かんたんトーク2

給付対象商品

携帯用会話補助装置

(音声・言語機能障害・ろうあ者)

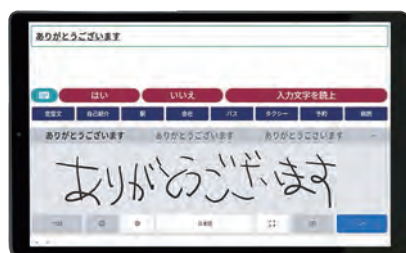

4つの入力方法&10定型文

- 50音ひらがなタッチ入力
 - スマホ式（フリック）入力
 - 手書き入力 ● キーボード入力
- よく使う言葉（定型文）を10個まで登録。ワンタッチで読み上げます。



持ち運びかんたん

本体は約B5サイズで、軽量・コンパクト充電式です。
オフラインで使用できるので、どこでも手軽に持ち運んで使うことができます。



困った時の緊急警報ボタン

緊急ボタンを押すと、緊急画面を表示。点滅しながら大音量の警報音で周りに知らせる「緊急警報」があるから安心です。

品番：J-K-talk2

¥98,800（非課税）

- 読み上げる音声は男性・女性が選択可能
- 文字の大きさや音量も簡単調整
- タッチペン付属

※ インターネット不要

ディスプレイ	10.1インチ	キーボードサイズ	260 x 395 x 10mm
本体サイズ	約 241 x 149 x 8mm	キーボード重量	約583g
本体質量	約 420g	キーボード電源	充電式リチウム電池
本体電源	リチウムイオンバッテリー(5000mAh)	キーボード接続方式	Bluetooth
使用時間	約10時間		
充電時間	約4.5時間 (ACアダプター使用時)		

※ 仕様は予告なく変更されることがございます。

商品の1週間無料貸し出し



購入前に実際に使ってみて下さい

聴こえをより良くする製品の効果は、実際に製品を試してみないと分からないものです。
音を光や振動に変える商品も、実際に生活の中で役に立つのかは使ってみないと分かりません。
自立コムでは一部を除きほぼ全ての製品を1週間無料で貸し出すことができます。
ご購入前にぜひ実際にお試しになってご検討にお役立て下さい。

- 貸し出し方法 -

15時までにご連絡頂ければ、即日発送いたします(貸出機の在庫がある場合)。

カタログで借りる

商品名と品番、個数など選び、下記までご連絡下さい。

Tel : 03-3476-2160
Fax : 03-3476-2425
E-mail : info-jiritsu@jiritsu.com

お電話の方はカタログ裏面の営業時間をご確認下さい。

インターネットで借りる

弊社ホームページで貸し出しを行っています。
買い物カゴに入れるように商品を簡単にレンタルできます。
24時間いつでもOK!ぜひご活用下さい。

自立コム

検索

<https://www.jiritsu.com>

- ※ 製品の貸し出しは日本国内に限ります。
- ※ 貸出機の在庫が切れている場合は、お時間がかかる場合がございます。
- ※ 貸出機の送料は実費でお客様負担となります。配送は着払い、返却はお客様の元払いです。
- ※ 貸し出しする製品数やサイズ、また配送地域によって送料が異なりますのでご注意ください。



販売店

株式会社自立コムホームページ



〒150-0044
東京都渋谷区円山町 28 番 4 号 大場ビル 5 階
株式会社自立コム TEL : 03-3476-2160 FAX : 03-3476-2425
mail : info-jiritsu@jiritsu.com
ホームページ : www.jiritsu.com

ホームページのお問い合わせフォーム、メールや FAX でのお問い合わせには翌営業日までに返信いたします。

営業時間：平日 09:00～17:00

土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は休業

(お盆・年末年始の休業日はホームページなどで告知します)

